

# VISIUM HD:

Unisci l'istologia e la trascrittomica  
a livello cellulare

Image provided by 10x Genomics

Scopri la potenza di **VISIUM HD**:  
due soluzioni distinte e innovative per esplorare l'intero  
**TRASCRIPTOMA a livello TISSUTALE** e con una **RISOLUZIONE a scala CELLULARE**.

**VALORIZZA** il potenziale dei tuoi **CAMPIONI ISTOLOGICI** con le tecnologie  
10x Genomics e porta la tua **RICERCA** scientifica a nuovi livelli.



#### UNIVERSALI

Analisi su qualsiasi  
tipologia di tessuto,  
specie e modalità di  
conservazione



#### SENSIBILI

Risoluzione massima  
di 2 µm e analisi  
unbiased di tutto il  
trascrittoma



#### RIPRODUCIBILI

Workflow unico che  
sfrutta i protocolli  
standard di istologia per  
la preparazione ed  
imaging del campione



#### COMPLETI

Software e servizi in  
Cloud gratuiti per  
analisi dei dati e  
cell segmentation



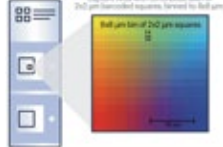
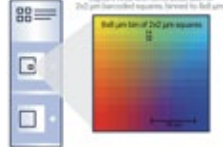
## HD WT Panel Gene Expression Protein coding gene coverage

- ✓ Recommended assay for differential gene expression in human and mouse
- ✓ Most flexible tissue compatibility
- ✓ Most sequencing-efficient Visium HD assay



## HD 3' Gene Expression Whole transcriptome coverage

- ✓ Recommended assay for expanded discovery applications
- ✓ Most diverse species compatibility
- ✓ De novo discovery, including feasibility for isoforms, TCRs/BCRs, and more

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRODUCTS</b>                            |  HD WT Panel Gene Expression                                                                                                                                                                                                      |  HD 3' Gene Expression                                                                                                   |
| <b>CHEMISTRY</b>                           |  Probe-based                                                                                                                                                                                                                      |  3' poly(A) capture-based (Reverse transcription)                                                                        |
| <b>COMPATIBLE SPECIES</b>                  |  Human<br> Mouse                                                                                                                                 |  Agnostic                                                                                                                |
| <b>COMPATIBLE SAMPLES</b>                  |  FFPE tissue<br> Fresh frozen tissue<br> Fixed frozen tissue |  Fresh frozen tissue                                                                                                     |
| <b>ASSAY INPUT</b>                         | Tissues sectioned onto glass slides                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tissues sectioned onto glass slides                                                                                                                                                                        |
| <b>INSTRUMENT</b>                          |  Visium CytAssist                                                                                                                                                                                                               |  Visium CytAssist                                                                                                      |
| <b>SLIDE ARCHITECTURE &amp; RESOLUTION</b> | Continuous lawn of 2 µm x 2 µm barcoded squares for single cell-scale resolution<br>                                                                                                                                            | Continuous lawn of 2 µm x 2 µm barcoded squares for single cell-scale resolution<br>                                   |
| <b>CAPTURE AREA SIZES</b>                  | 6.5 x 6.5 mm (2 Capture Areas per slide)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.5 x 6.5 mm (2 Capture Areas per slide)                                                                                                                                                                   |
| <b>SAME-SECTION CAPABILITIES</b>           |  Gene expression<br> Protein (IF)<br> Morphology (H&E)    |  Protein (IF)<br> Morphology (H&E) |