

CATALOGO
SUTURATRICI



Euro  *clone*

Servizi Medicales

Customer Service

Il Customer Service di Euroclone offre supporto telefonico al cliente relativo a problematiche sullo stato degli ordini e disponibilità dei prodotti; informazioni relative alla rete di vendita disponibile sul territorio e gestione degli ordini di vendita, conto deposito, service, noleggi, campionature, visioni, comodati d'uso.

Logistica

La logistica di Euroclone garantisce la puntualità delle consegne, evitando problemi e ritardi, garantendo al cliente di essere sempre fornito nel rispetto delle deadline con la quantità di prodotto richiesta.

Product Specialist

Gli specialisti di Euroclone offrono un supporto in grado di soddisfare ogni esigenza del cliente offrendo così un importante supporto diretto sul territorio italiano.

- Consulenza pre e post vendita
- Possibilità della presenza del product specialist durante gli interventi
- Training del personale presente in sala operatoria
- Dimostrazioni tecniche e pratiche
- Introduzione alle diverse tecniche operatorie, con riferimento ai prodotti forniti
- Assistenza tecnica
- Risoluzione dei problemi
- Supporto tecnico scientifico

Formazione

Euroclone offre un'offerta didattica che, anno dopo anno, si sviluppa in Corsi, Seminari, Workshop presso i propri Centri di Formazione e presso i Centri ospedalieri italiani, oltre che la partecipazione a Congressi Regionali e Nazionali del Settore.

Qualità

I dispositivi medici, da noi commercializzati e i dispositivi diagnostici in vitro impiegati nella citogenetica sono conformi alle normative europee 2017/745 e 2017/746.

Certificazioni

ISO 9001, ISO 13485 e ISO 14001.

ISO 9001 e ISO 13485 certificano che Euroclone S.p.A., dal punto di vista della progettazione, sviluppo, assistenza tecnica e commercializzazione dei prodotti per le Life Sciences, i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro, sono conformi alle normative attualmente in vigore.

ISO 14001 certifica che Euroclone opera nel pieno rispetto dell'ambiente e le sue azioni sono caratterizzate da una forte impronta ecologica.

Come raggiungere rapidamente l'informazione o il Servizio che Vi serve

- dal lunedì al giovedì, dalle 09.00 alle 18.00
- il venerdì, dalle 09.00 alle 13.00

CENTRALINO - Phone: 02 38195.1

- **Per ordinare e per informazioni sull'evasione di ordini**
Digitate 1 - per ordini medicali
Fax: 02 33913713 | e-mail: order.med@euroclone.it
- **Offerte e precisazioni sulle caratteristiche tecniche dei prodotti**
Digitate 2 - per gare e offerte di prodotti medicali
Fax: 02 33913713 | e-mail: offerte.med@euroclone.it
- **Assistenza tecnica**
Digitate 4 - per interventi di assistenza tecnica
Fax: 02 33913713 | e-mail: sat@euroclone.it
- **Centralino**
Digitate 0 - per parlare con un operatore

Indice

1. Nuova suturatrice motorizzata a batteria	4
2. Suturatrice endoscopica con leva di articolazione non-stop	8
3. Suturatrici endolineari con caricatori articolabili	10
4. Suturatrici lineari con lama	12
5. Suturatrice lineare retta con lama CAAB-40	14
6. Suturatrici lineari senza lama	16
7. Suturatrici circolari curve standard	18
7.1 Suturatrici circolari curve stelo lungo	20
8. Suturatrici circolari per anopessi ad alto volume	22
9. Suturatrici circolari per anopessi standard	24
Condizioni generali di fornitura	26

1. Nuova suturatrice motorizzata a batteria

SMART

ASSISTITA ELETTRONICAMENTE
Ricariche con "CHIP" incorporato per la scelta più precisa del chirurgo



Innovativo Sistema di articolazione di 45° gradi "Non-Stop"

Manipolo universale più ergonomico e più facile da ruotare di 360° gradi



Sistema di chiusura, apertura e azionamento "ONE TOUCH".

MANIPOLO SMART UNIVERSALE per le ricariche da 30-45-60 mm

Suturatrice intelligente con identificazione della ricarica, riconoscimento del tessuto e controllo dell'azionamento.



Tecnologia P2G

- Tecnologia "Double Grip"
- Diffusione laterale dei fluidi
- Migliore compressione dei tessuti



La **Tecnologia P2G** garantisce una sutura migliore con più sicurezza e migliore emostasi

Nuova generazione di suturatrici endoscopiche

Suturatrici Smart, ricaricabili fino a 15 volte per intervento

Codice	Descrizione prodotto	Colore
PEAS	Manipolo MOTORIZZATO per suturatrice endoscopica con lama con articolazione "Non-Stop" (Stelo corto 6 cm)	-
PEAM	Manipolo MOTORIZZATO per suturatrice endoscopica con lama con articolazione "Non-Stop" (Stelo standard 16 cm)	-
PEAL	Manipolo MOTORIZZATO per suturatrice endoscopica con lama con articolazione "Non-Stop" (Stelo lungo 26 cm)	-

Ricarica Endoscopica Articolabile

Codice	Descrizione prodotto	Colore
CADF-30T	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 30 mm con altezza punti 2.5 mm. Articolabile.	BIANCO ○
CADF-30N	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 30 mm con altezza punti 3.5 mm. Articolabile.	BLU ●
CADF-45T	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 2.5 mm. Articolabile.	BIANCO ○
CADF-45N	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 3.5 mm. Articolabile.	BLU ●
CADF-45S	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 4.2 mm. Articolabile.	ORO ●
CADF-45D	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 4.8 mm. Articolabile.	VERDE ●
CADF-45R	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 5.0 mm. Articolabile.	NERO ●
CADF-60T	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 2.5 mm. Articolabile.	BIANCO ○
CADF-60N	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 3.5 mm. Articolabile.	BLU ●
CADF-60S	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 4.2 mm. Articolabile.	ORO ●
CADF-60D	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 4.8 mm. Articolabile.	VERDE ●
CADF-60R	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 5.0 mm. Articolabile.	NERO ●

EUROCLONE OFFRE, CON I SUOI SPECIALISTI DI PRODOTTO, UN SUPPORTO PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA.

CONSULENZA PRE E POST VENDITA

PRESENZA DURANTE GLI INTERVENTI

TRAINING DEL PERSONALE IN SALA OPERATORIA

DIMOSTRAZIONI TECNICHE E PRATICHE


ASSISTENZA TECNICA

SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO

2. Suturatrice endoscopica con leva di articolazione non-stop



L'ampia apertura delle morse consente un facile posizionamento sui tessuti. **Due triple file sfalsate** di punti in titanio forniscono un'emostasi superiore.

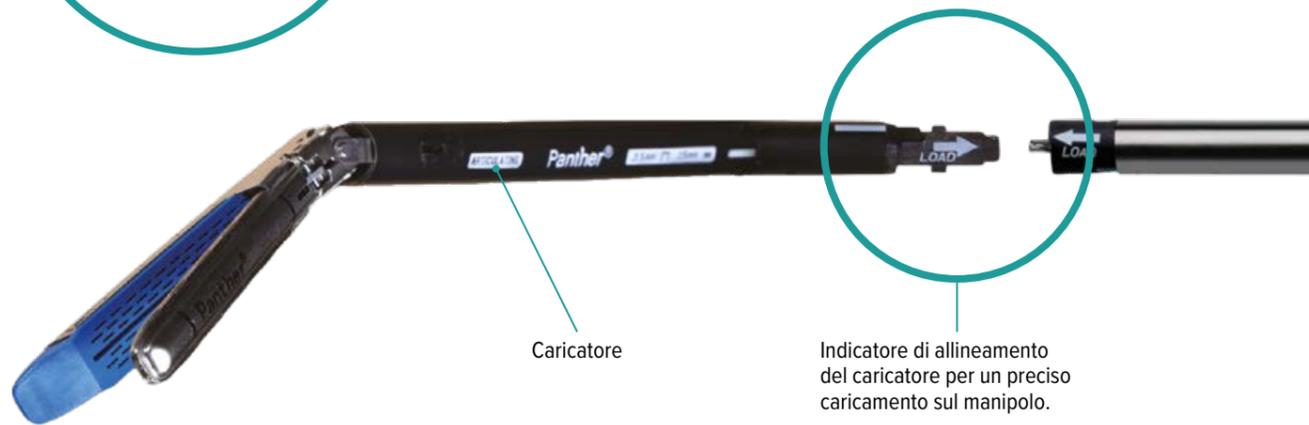

Caricatore

Indicatore di allineamento del caricatore per un preciso caricamento sul manipolo.



La **gamma più completa** di caricatori per coprire tutte le esigenze chirurgiche.

Cinque differenti altezze di punto aperto: **2.5 mm, 3.5 mm, 4.2 mm, 4.8 mm, 5.0 mm**, destinate a diversi spessori di tessuto.



Manipolo ergonomico compatibile con tutti i caricatori

Articolazione **NON-STOP** a 45°



Nuovo pulsante di ricarica

Più facile da utilizzare.

Nuovo grilletto

Sistema di chiusura e apertura dello strumento con funzione di presa e rilascio.

3. Suturatrici endolineari con caricatori articolabili



La gamma più completa di caricatori per coprire tutte le esigenze chirurgiche.

Cinque differenti altezze di punto aperto: 2.5 mm, 3.5 mm, 4.2 mm, 4.8 mm, 5.0 mm, destinate a diversi spessori di tessuto.

Codice	H. punti aperti (mm)	H. punti chiusi (mm)	Colore
T	2.5	1.0	BIANCO ○
N	3.5	1.5	BLU ●
S	4.2	1.8	ORO ●
D	4.8	2.0	VERDE ●
R	5.0	2.35	NERO ●

Codifica colore universale per determinare l'altezza dei punti: BIANCO per tessuti vascolari, BLU per standard, ORO per mediospessi, VERDE per spessi, NERO per ultraspessi.

Caricatori BIANCHI e BLU e ORO compatibili con trocar con diametro da 12 mm, caricatori VERDI e NERI con trocar diametro 15 mm.

Offrono un design ergonomico ed un manipolo universale ricaricabile fino a 25 volte per intervento.

Manipolo per suturatrice monopaziente endoscopica ricaricabile lineare con lama

Codice	Descrizione prodotto	Colore	Conf.
CEAC30	Manipolo ricaricabile, lungh. stelo 16 cm (standard)	-	1 pz
CEAC45	Manipolo ricaricabile, lungh. stelo 6 cm (corto)	-	1 pz
CEAC60	Manipolo ricaricabile, lungh. stelo 26 cm (lungo)	-	1 pz

Codice	Descrizione prodotto	Colore	Conf.
CADF-30T 2.5	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 30 mm con altezza punti 2.5 mm. Articolabile.	BIANCO ○	1 pz
CADF-30N 3.5	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 30 mm con altezza punti 3.5 mm. Articolabile.	BLU ●	1 pz
CADF-45T 2.5	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 2.5 mm. Articolabile.	BIANCO ○	1 pz
CADF-45N 3.5	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 3.5 mm. Articolabile.	BLU ●	1 pz
CADF-45S 4.2	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 4.2 mm. Articolabile.	ORO ●	1 pz
CADF-45D 4.8	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 4.8 mm. Articolabile.	VERDE ●	1 pz
CADF-45R 5.0	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 5.0 mm. Articolabile.	NERO ●	1 pz

Codice	Descrizione prodotto	Colore	Conf.
CADF-60T 2.5	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 2.5 mm. Articolabile.	BIANCO ○	1 pz
CADF-60N 3.5	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 3.5 mm. Articolabile.	BLU ●	1 pz
CADF-60S 4.2	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 4.2 mm. Articolabile.	ORO ●	1 pz
CADF-60D 4.8	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 4.8 mm. Articolabile.	VERDE ●	1 pz
CADF-60R 5.0	Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 5.0 mm. Articolabile.	NERO ●	1 pz

Caricatori Monouso articolabili a punta curva


Codice	Descrizione prodotto	Colore	Conf.
CADC-30T 2.5	Linea di sutura 30 mm, altezza punti 2.5 mm, articolabile a punta curva	BIANCO ○	1 pz
CADC-45T 2.5	Linea di sutura 45 mm, altezza punti 2.5 mm, articolabile a punta curva	BIANCO ○	1 pz



4. Sutureatrici lineari con lama

Caricatore con **lama integrata** per garantire un'elevata precisione di taglio e utilizzo

Sutureatrice completa di caricatore e ricaricabile fino a **7 volte**

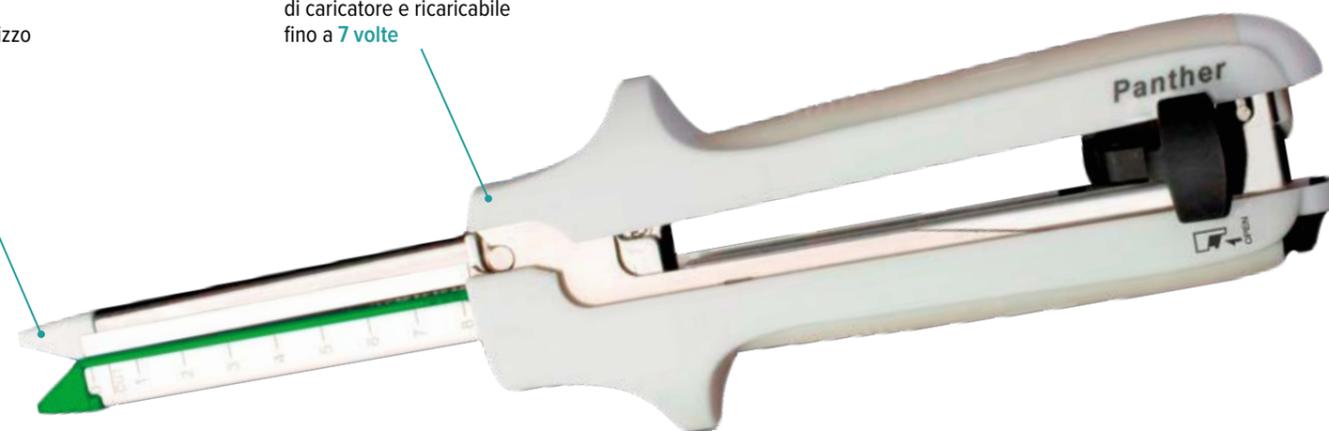

- Due doppie file di sutura sfalsate con punti in titanio.
- Emostasi eccellente: il taglio segue progressivamente la posa dei punti di sutura.
- Azionamento di taglio/sutura eseguibile indifferentemente da entrambi i lati: la presenza della leva di avanzamento da tutti e due i lati della sutureatrice consente un facile utilizzo a destrorsi e mancini.
- Estremamente sicura: una volta utilizzato il caricatore, la lama si blocca per evitare tagli accidentali.

Codice	Descrizione prodotto	Colore	Conf.
SSAB-60D	Sutureatrice monopaziente lineare con lama, linea di sutura 60 mm, altezza punti 4.8 mm	-	1 pz
SSAB-60N	Sutureatrice monopaziente lineare con lama, linea di sutura 60 mm, altezza punti 3.8 mm	-	1 pz
SSAB-80D	Sutureatrice monopaziente lineare con lama, linea di sutura 80 mm, altezza punti 4.8 mm	-	1 pz
SSAB-80N	Sutureatrice monopaziente lineare con lama, linea di sutura 80 mm, altezza punti 3.8 mm	-	1 pz
SSAB-100N	Sutureatrice monopaziente lineare con lama, linea di sutura 100 mm, altezza punti 3.8 mm	-	1 pz
SSAB-100D	Sutureatrice monopaziente lineare con lama, linea di sutura 100 mm, altezza punti 4.8 mm	-	1 pz
SADB-60D	Caricatore monouso per sutureatrice lineare con lama, linea di sutura di 60 mm, altezza punti 4.8 mm	VERDE	● 1 pz
SADB-60N	Caricatore monouso per sutureatrice lineare con lama, linea di sutura di 60 mm, altezza punti 3.8 mm	BLU	● 1 pz
SADB-80D	Caricatore monouso per sutureatrice lineare con lama, linea di sutura di 80 mm, altezza punti 4.8 mm	VERDE	● 1 pz
SADB-80N	Caricatore monouso per sutureatrice lineare con lama, linea di sutura di 80 mm, altezza punti 3.8 mm	BLU	● 1 pz
SADB-100D	Caricatore monouso per sutureatrice lineare con lama, linea di sutura di 100 mm, altezza punti 4.8 mm	VERDE	● 1 pz
SADB-100N	Caricatore monouso per sutureatrice lineare con lama, linea di sutura di 100 mm, altezza punti 3.8 mm	BLU	● 1 pz

Adatte per la Chirurgia Open, garantiscono un'elevata precisione di taglio e sutura con la massima semplicità di utilizzo.



- Tecnologia atraumatica **Extra Grip (EG)**
- Meno slittamento ad ogni sparo
- Tessuto trattenuto efficacemente nelle morse
- Forza di azionamento ridotta
- Linea di sutura uniforme e coerente
- Risparmio dei costi



Possibilità di utilizzo con classica presa a due mani o presa a forbice

Codice	H. punti aperti (mm)	H. punti chiusi (mm)	Colore
N	3.8	1.5	BLU ●
D	4.8	2.0	VERDE ●

Codifica colore universale per determinare l'altezza dei punti: BLU per standard, VERDE per spessi.

5. Suturatrice lineare retta con lama CAAB-40



Linea dritta di taglio e linea di sutura.
Una buona linea di sutura assicura una perfetta irrorazione sanguigna.



Il corpo cartuccia-incudine più corto e l'apertura delle morse più ampia sul mercato. Facilita l'accesso della suturatrice ed il suo perfetto posizionamento sui tessuti.



Design unico: taglio e sutura insieme.
La direzione del taglio è perpendicolare rispetto alla sutura. La sutura precede il taglio, garantendo un taglio preciso anche su tessuti più spessi.

Dedicata per la chirurgia del retto basso. La suturatrice monopaziente ricaricabile combina una linea di sutura da 40 mm ed il taglio progressivo.

Lo stelo più lungo pari a 265 mm consente di raggiungere anche la pelvi più profonda, eseguendo agevolmente la chirurgia del retto basso.

Grazie al design ergonomico, occorre minor forza sull'impugnatura.

Modello	Descrizione	Lunghezza linea sutura	Lunghezza linea taglio	Punto aperto	Punto chiuso
CAAB-40	Suturatrice Lineare Retta con Lama	43 mm	40 mm	4.8 mm	2.0 mm
CAZB-40D	Caricatore per Suturatrice CAAB	43 mm	40 mm	4.8 mm	2.0 mm

6. Suturatrici lineari senza lama



- Due file di sutura sfalsate con punti in titanio.
- Guida da entrambi i lati della testina: elevata precisione di taglio.
- Sistema di bloccaggio del tessuto automatico o manuale: il pin per bloccare il tessuto si aziona manualmente mediante la levetta di azionamento prima di chiudere la suturatrice oppure automaticamente al primo step di chiusura.
- Meccanismo di sicurezza: impedisce la chiusura della suturatrice in caso di errato posizionamento del caricatore o di caricatore già utilizzato.
- Indicatore colorato posto sul retro che consente al chirurgo di conoscere lo stato di avanzamento di chiusura, supportandolo in caso di scarsa visibilità intraoperatoria.

H. punti aperti (mm)	H. punti chiusi (mm)	Colore
3.5	1.5	BLU ●
4.8	2.0	VERDE ●

Codifica colore universale per determinare l'altezza dei punti: BLU per standard, VERDE per spessi.

Codice	Descrizione prodotto	Conf.
FLSLF30-3.5	Suturatrice Panther monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 30 mm, altezza punti 3.5 mm	1 pz
FLSLF30-4.8	Suturatrice Panther monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 30 mm, altezza punti 4.8 mm	1 pz
FLSLF45-3.5	Suturatrice Panther monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 45 mm, altezza punti 3.5 mm	1 pz
FLSLF45-4.8	Suturatrice Panther monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 45 mm, altezza punti 4.8 mm	1 pz
FLSLF60-3.5	Suturatrice Panther monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 60 mm, altezza punti 3.5 mm	1 pz
FLSLF60-4.8	Suturatrice Panther monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 60 mm, altezza punti 4.8 mm	1 pz
FLSLF90-3.5	Suturatrice Panther monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 90 mm, altezza punti 3.5 mm	1 pz
FLSLF90-4.8	Suturatrice Panther monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 90 mm, altezza punti 4.8 mm	1 pz

Ideali per interventi in chirurgia Open, con un'ampia gamma di dimensioni, integrando l'innovazione tecnologica dell'indicatore colorato posto sul retro.




1. Bianco APERTO
2. Giallo CHIUSURA PARZIALE
3. Verde CHIUSURA TOTALE
4. Rosso SUTURA EFFETTUATA

Chiusura progressiva della Suturatrice. L'indicatore colorato posto sul retro cambia durante le varie fasi di chiusura, supportando il chirurgo.

Codice	Descrizione prodotto	Colore	Conf.
FLSLH3.5A30	Caricatore Panther monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 30 mm, altezza punti 3.5 mm	BLU ●	1 pz
FLSLH4.8A30	Caricatore Panther monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 30 mm, altezza punti 4.8 mm	VERDE ●	1 pz
FLSLH3.5B45	Caricatore Panther monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 45 mm, altezza punti 3.5 mm	BLU ●	1 pz
FLSLH4.8B45	Caricatore Panther monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 45 mm, altezza punti 4.8 mm	VERDE ●	1 pz
FLSLH3.5C60	Caricatore Panther monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 60 mm, altezza punti 3.5 mm	BLU ●	1 pz
FLSLH4.8C60	Caricatore Panther monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 60 mm, altezza punti 4.8 mm	VERDE ●	1 pz
FLSLH3.5E90	Caricatore Panther monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 90 mm, altezza punti 3.5 mm	BLU ●	1 pz
FLSLH4.8E90	Caricatore Panther monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 90 mm, altezza punti 4.8 mm	VERDE ●	1 pz

7. Suturatrici circolari curve standard

STANDARD

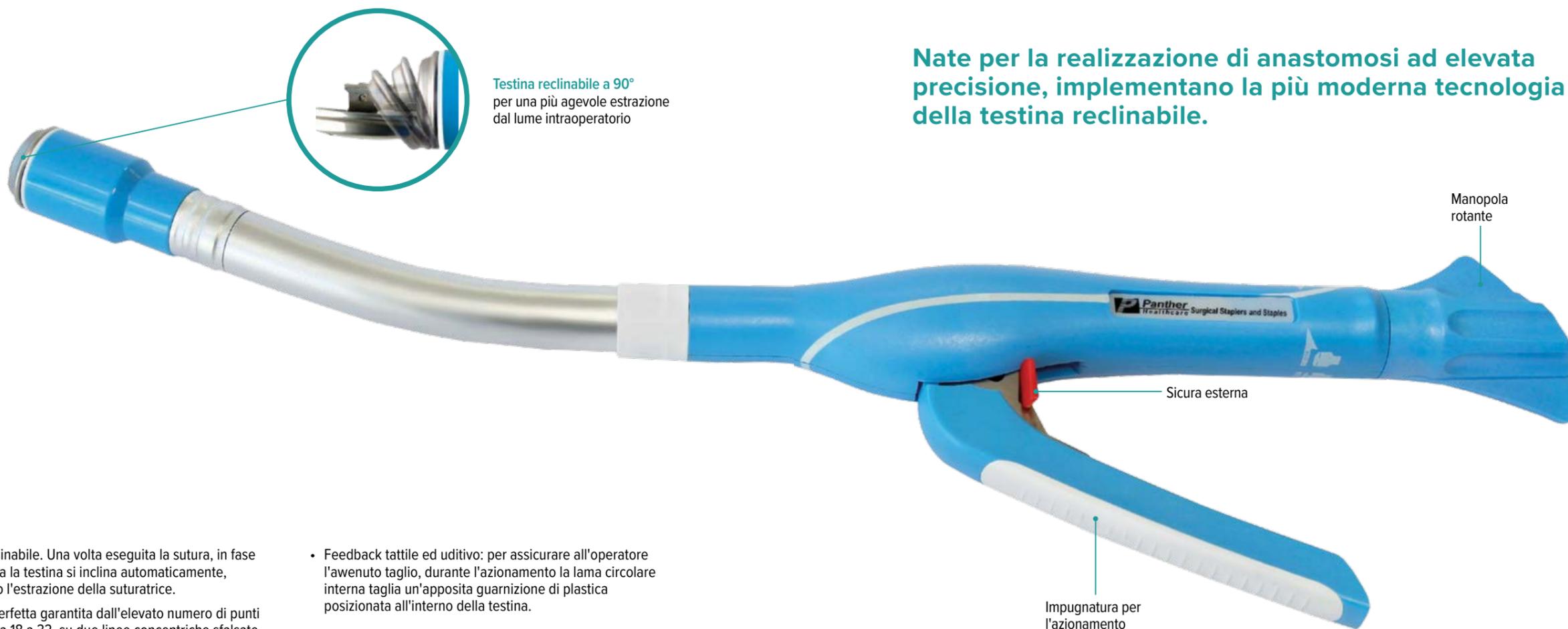

Nate per la realizzazione di anastomosi ad elevata precisione, implementano la più moderna tecnologia della testina reclinabile.

- Testina reclinabile. Una volta eseguita la sutura, in fase di riapertura la testina si inclina automaticamente, agevolando l'estrazione della suturatrice.
- Emostasi perfetta garantita dall'elevato numero di punti in titanio (da 18 a 32, su due linee concentriche sfalsate, a seconda del diametro della suturatrice).
- Feedback tattile ed uditivo: per assicurare all'operatore l'awenuto taglio, durante l'azionamento la lama circolare interna taglia un'apposita guarnizione di plastica posizionata all'interno della testina.

Con testina reclinabile

Codice	Descrizione prodotto	Conf.
FCSME21	Suturatrice Circolare con testina ribaltabile, diam. 21 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo standard	1 pz
FCSME24	Suturatrice Circolare con testina ribaltabile, diam. 24 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo standard	1 pz
FCSME26	Suturatrice Circolare con testina ribaltabile, diam. 26 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo standard	1 pz
FCSME29	Suturatrice Circolare con testina ribaltabile, diam. 29 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo standard	1 pz
FCSME32	Suturatrice Circolare con testina ribaltabile, diam. 32 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo standard	1 pz

Senza testina reclinabile

Codice	Descrizione prodotto	Conf.
FCSLWBE21	Suturatrice Panther monouso circolare, diam. 21 mm, con doppio meccanismo di sicurezza	1 pz
FCSLWBE24	Suturatrice Panther monouso circolare, diam. 24 mm, con doppio meccanismo di sicurezza	1 pz
FCSLWBE26	Suturatrice Panther monouso circolare, diam. 26 mm, con doppio meccanismo di sicurezza	1 pz
FCSLWBE29	Suturatrice Panther monouso circolare, diam. 29 mm, con doppio meccanismo di sicurezza	1 pz
FCSLWBE32	Suturatrice Panther monouso circolare, diam. 32 mm, con doppio meccanismo di sicurezza	1 pz
FCSLWBE34	Suturatrice Panther monouso circolare, diam. 34 mm, con doppio meccanismo di sicurezza	1 pz



Doppio meccanismo di sicurezza (esterno ed interno) per prevenire azionamenti accidentali. Per ottenere una perfetta chiusura dei punti è necessario posizionare l'indicatore rosso al centro della banda verde.

Diametro (mm)	H. punti aperti (mm)	H. punti chiusi (mm)
24	4.5	1.8
26 - 29	4.8	2.0
32 - 34*	5.0	2.2

*La suturatrice da 34 mm è disponibile solamente nella versione senza testina reclinabile.

7.1 Suturatrici circolari curve stelo lungo

STELO LUNGO



Testina ribaltabile a 90°

Per una più facile e sicura rimozione dopo l'anastomosi, riducendo al massimo il trauma tissutale.



Rondella di taglio migliorata

Fornisce al Chirurgo un chiaro feedback uditivo dopo l'azionamento.




Caricatore ed incudine autobloccanti

Previene lo scivolamento del tessuto ed elimina il problema quando l'incudine ritorna dopo l'azionamento della suturatrice.

Un ampio range di suturatrici circolari avanzate per ogni esigenza chirurgica.

Design ermetico pensato per la chirurgia laparoscopica, per prevenire perdite di pneumoperitoneo.

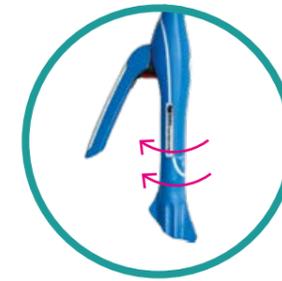

Doppia velocità di chiusura

Durante la fase finale di chiusura dello strumento, la chiusura ottenuta con ogni giro dell'aletta a farfalla è più ravvicinata rispetto a quella iniziale. Questo fornisce un miglior controllo sull'azione di chiusura, evitando ogni possibile danno al tessuto che viene compresso in modo più sicuro.



Doppia Sicura

Previene azionamenti accidentali.

Codice	Descrizione prodotto	Conf.
FCSLWAF25	Suturatrice Circolare con testina ribaltabile, diam. 25 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo lungo	1 pz
FCSLWAF29	Suturatrice Circolare con testina ribaltabile, diam. 29 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo lungo	1 pz
FCSLWAF32	Suturatrice Circolare con testina ribaltabile, diam. 32 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo lungo	1 pz

8. Suturatrici circolari per anopessi ad alto volume

Studiate per il trattamento dell'anopessi, permettono di soddisfare tutte le esigenze grazie all'ampia gamma di diametri e alla cartuccia dal volume maggiorato.



Cartuccia trasparente che garantisce la massima visibilità della mucosa rettale.




2 grandi finestre per il passaggio dei fili di sutura che facilitano il posizionamento del prolasso nella cartuccia.



Indicatore di sicurezza con display allargato che permette di regolare facilmente l'altezza del punto



Manopola rotante semplice da aprire e chiudere

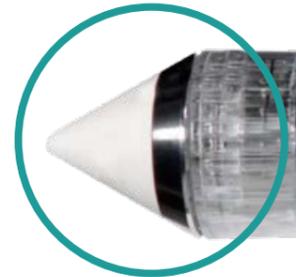

Marcatori di distanza tra anastomosi e margine anale

Cartuccia ad alto volume. Il 20% di capienza in più rispetto al modello classico.

Altezza del punto aperto (3,8 mm). Numero di graffette (32 o 34 a seconda del diametro) che garantisce ottima emostasi.



Dispositivo di sicurezza esterno

Sistema di sicurezza uditivo. Un feedback sonoro indica che la sutratrice è pronta per essere attivata in sicurezza.



Otturatore



Anoscopio finestrato



Tensionatore dei fili di sutura



Dilatatore anale a farfalla e circolare, {CAD}

Diametro (mm)	H. punti aperti (mm)	H. punti chiusi (mm)
32,34	3.8	0.75 - 1.5

Codice	Descrizione prodotto	Capacità ml (Volume cc)	Conf.
FCSSME32	Sutratrice Panther monouso per emorroidi, Ø 32 mm, con cartuccia trasparente, feedback uditivo, completa di dilatatore e otturatore anale circolare, anoscopio fenestrato e tensionatore del filo di sutura	23,04	1 pz
FCSSME34	Sutratrice Panther monouso per emorroidi, Ø 34 mm, con cartuccia trasparente, feedback uditivo, completa di dilatatore e otturatore anale circolare, anoscopio fenestrato e tensionatore del filo di sutura	27,15	1 pz

9. Suturatrici circolari per anopessi standard

Studiate per il trattamento dell'anopessi, permettono di soddisfare tutte le esigenze grazie all'ampia gamma di diametri.



- Procedura di anopessi: la **cartuccia trasparente** garantisce la massima visibilità della mucosa rettale.
- Ampia gamma di diametri (32, 33, 34 mm) per soddisfare tutte le esigenze.
- Comodità nel passaggio dei fili di sutura: 4 finestre poste a 90° alla base della cartuccia.
- Regolazione della chiusura del punto in titanio nell'intervallo compreso tra 0,75 e 1,5 mm. L'altezza del punto aperto di 3,8 mm è studiata per assicurare un'ottima emostasi e al contempo permettere la chiusura tramite una forma a "B" perfetta.
- Elevato numero di punti (da 32 a 34), a seconda del diametro della suturatrice, distribuiti su due linee concentriche sfalsate, per garantire una perfetta emostasi.

Diametro [mm]	H. punti aperti (mm)	H. punti chiusi (mm)
32, 33, 34	3,8	0,75 - 1,5

Codice	Descrizione prodotto	Conf.
FCSSWAE32	Suturatrice Panther monouso per emorroidi, diam. 32 mm, con cartuccia trasparente, completa di dilatatore e otturatore anale circolare, anoscopio fenestrato e tensionatore del filo di sutura	1 pz
FCSSWAE33	Suturatrice Panther monouso per emorroidi, diam. 33 mm, con cartuccia trasparente, completa di dilatatore e otturatore anale circolare, anoscopio fenestrato e tensionatore del filo di sutura	1 pz
FCSSWAE34	Suturatrice Panther monouso per emorroidi, diam. 34 mm, con cartuccia trasparente, completa di dilatatore e otturatore anale circolare, anoscopio fenestrato e tensionatore del filo di sutura	1 pz



Il kit sterile monouso comprende:

- Suturatrice (da 32, 33 o 34 mm)
- Dilatatore anale circolare (CAD)
- Anoscopio fenestrato
- Otturatore
- Tensionatore dei fili di sutura



Doppio meccanismo di sicurezza (esterno ed interno) per prevenire azionamenti accidentali. Per ottenere una perfetta chiusura dei punti è necessario posizionare l'indicatore rosso al centro della banda verde.

Condizioni generali di fornitura

I prodotti distribuiti da Euroclone S.p.A. sono forniti nel rispetto delle direttive comunitarie applicabili

1. Accettazione ordini

- 1.1. Gli ordini d'acquisto devono essere indirizzati a EuroClone S.p.A., via Figino 20/22, 20016 Pero (MI), tel. n° 02.381951, fax n° 02.38101465.
- 1.2. Gli ordini d'acquisto telefonici devono essere confermati per iscritto, indicando chiaramente: "conferma d'ordine telefonico".
- 1.3. Gli ordini d'acquisto si intendono accettati solo dopo il ricevimento della loro conferma scritta.
- 1.4. L'importo minimo fatturabile è di € 150,00 IVA esclusa

2. Prezzi

- 2.1. I prezzi offerti comprendono i costi per l'imballaggio.
- 2.2. I prezzi offerti non comprendono l'IVA.
- 2.3. I prezzi offerti sono validi per 90 giorni o fino alla data indicata nel documento di offerta.
- 2.4. I prezzi del listino possono essere variati da EuroClone S.p.A. senza preavviso.

3. Condizioni di pagamento

- 3.1. Se non diversamente specificato nell'accettazione dell'ordine l'acquirente accetta di rimettere il pagamento completo all'indirizzo indicato nella fattura per tutte le spedizioni mediante RIMESSA DIRETTA entro 30 GIORNI a partire dalla data di consegna o di collaudo, quando previsto.
- 3.2. Nel caso in cui il pagamento non sia rimesso completamente entro il termine pattuito, EuroClone S.p.A. si riserva il diritto di addebitare all'acquirente gli interessi di mora in accordo alle vigenti disposizioni di legge (D.Lgs. 192/2012 - relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180).
- 3.3. Nel caso di nuovo Cliente, che non sia ente pubblico, è richiesto il pagamento in contrassegno; eventuali deroghe a tale disposizione devono essere concordate direttamente con EuroClone S.p.A..
- 3.4. Pagamento di strumentazioni/apparecchiature che prevedono installazione e collaudo eseguito da EuroClone S.p.A. o per conto di EuroClone S.p.A.. Il collaudo di una strumentazione o apparecchiatura fornita deve essere programmato, dal Cliente, entro 10 giorni dalla data di consegna del bene e comunque deve essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di consegna del bene. Nel caso le operazioni di collaudo non possano avvenire, per volontà estranea ad EuroClone S.p.A., entro i 30 giorni dalla data di consegna del bene, EuroClone S.p.A. provvederà a richiedere il pagamento di quanto dovuto come previsto dal punto 3.1 considerando come termine il 30° giorno dalla data di consegna del bene. Deroghe a tali disposizioni devono essere preventivamente concordate per iscritto con EuroClone S.p.A.

4. Tempi e modalità di consegna

- 4.1. Se non diversamente specificato nell'offerta, EuroClone S.p.A. si impegna a consegnare la merce ordinata entro il termine stimato di 180 giorni (per le apparecchiature) o di 30 giorni (per il consumabile) a partire dalla data di accettazione dell'ordine.
- 4.2. La merce viaggia in porto franco per ordini il cui ammontare netto sia superiore a € 400,00 (IVA esclusa). Ordini, o consegne scalari richieste, di importo inferiore a € 400,00 (IVA esclusa) sono soggetti ad un addebito forfetario in fattura di € 30,00 (IVA esclusa), per concorso alle spese di gestione amministrativa, imballo e trasporto.
- 4.2. bis PER CONSEGNE DI PRODOTTI REFRIGERATI (GHIACCIO SECCO) VIENE AGGIUNTO IN FATTURA UN ADEBITO DI € 10,00 (IVA esclusa).
- 4.3. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente, anche se venduta franco destino.
- 4.4. La consegna della merce deve essere sempre intesa come effettuata su "piano strada".

5. Accettazione e restituzione delle merci

- 5.1. Nessun prodotto può essere reso a EuroClone S.p.A. senza la sua preventiva autorizzazione scritta.
- 5.2. Rese non autorizzate saranno rispedito al mittente a spese di questo.
- 5.3. L'eventuale reclamo deve essere comunicato per iscritto a EuroClone S.p.A., entro giorni 8 (otto) dalla data di ricevimento della merce; trascorso tale termine la merce si intende definitivamente accettata, con decadenza di ogni diritto o azione al riguardo, secondo quanto previsto dall'art.1495 c.c., e l'acquirente sarà tenuto a provvedere al pagamento secondo le condizioni qui riportate al punto 3 (tre).
- 5.4. La richiesta di reso deve contenere le seguenti informazioni: numero codice, quantità, numero lotto, causa del reso (merce mancante o non corrispondente ai termini indicati nel contratto di vendita, merce difettosa).
- 5.5. Le spese di spedizione dei prodotti resi sono a carico dell'acquirente.

6. Termini di garanzia da difetto di costruzione di apparecchi

- 6.1. Se non diversamente specificato nel preventivo, EuroClone S.p.A. garantisce all'acquirente che l'apparecchiatura a lui venduta è, all'atto dell'invio, esente da difetti sia nel materiale che nella lavorazione. In base a tale garanzia, EuroClone S.p.A. si dichiara disposta a riparare o sostituire, a propria discrezione, senza alcun addebito a carico dell'acquirente, sempre che lo strumento sia installato sul territorio nazionale, qualsiasi parte dell'apparecchiatura, fatto salvo l'uso improprio della stessa ed eventi non correlati al

funzionamento della stessa, entro mesi 12 (dodici) dalla data di consegna all'acquirente o dalla data di collaudo, se previsto e comunque entro giorni 30 (trenta) dalla data di consegna.

- 6.2. Ad installazione avvenuta, qualsiasi messa a punto, regolazione, ripulitura o ricalibratura, non causata da difetti provati nel materiale o nella lavorazione, verrà eseguita solo in base alle tariffe in vigore del centro di Assistenza Tecnica di EuroClone S.p.A.
- 6.3. EuroClone S.p.A. si impegna ad onorare i termini di garanzia descritti in questo stesso punto 6 (sei) delle condizioni generali di fornitura, solo in seguito a notifica scritta da parte dell'acquirente di un eventuale difetto dell'apparecchiatura venduta. Allo scopo di assicurare un adeguato servizio di garanzia, EuroClone S.p.A. si riserva il diritto di decidere se effettuare l'intervento di riparazione presso il Cliente, oppure presso i propri centri di assistenza autorizzati, con trasporto e assicurazione a carico dell'acquirente.
- 6.4. La componentistica soggetta ad usura, laddove presente, quale parti in gomma, in plastica, in vetro, lampade, filtri, prefiltri, sensori "tube termistor", ecc., non può rientrare nei termini di garanzia descritti in questo stesso punto 6 (sei) delle condizioni generali di fornitura.
7. **Installazione e collaudo delle apparecchiature**
 - 7.1. Se non diversamente specificato sull'offerta, il servizio di installazione, che sarà reso sul territorio nazionale, è escluso dal prezzo d'acquisto dell'apparecchiatura venduta.
 - 7.2. Per apparecchiature che richiedono l'installazione da parte del personale di assistenza tecnica di EuroClone S.p.A., è compito dell'acquirente preparare il luogo di installazione e fornire i servizi richiesti (energia elettrica, acqua, scarichi, aria compressa, bombole di gas, risorse per il prelevamento e il trasferimento delle apparecchiature nella loro posizione, permessi, licenze, approvazioni, ecc.). Se ciò non fosse fatto, EuroClone S.p.A. esporrà un costo di servizio per la manodopera e il materiale impiegati.
 - 7.3. Il collaudo, che sia effettuato in sede o presso il Cliente, è incluso nel prezzo offerto.
 - 7.4. Il personale di assistenza tecnica ed il personale addetto alle vendite di EuroClone S.p.A. non sono autorizzati a sottoscrivere alcuna clausola di indennizzo o scarico di responsabilità a nome di EuroClone S.p.A.. All'atto dell'installazione il personale di EuroClone S.p.A. si limiterà ad illustrare all'operatore il corretto uso dello strumento.
 - 7.5. Qualora l'installazione e/o collaudo non possano avere luogo alla data stabilita per l'inadeguatezza dei luoghi o indisponibilità del personale ed il Cliente non ne dia preavviso in tempo utile entro 3 giorni lavorativi dalla data concordata, l'installazione e/o collaudo si considereranno effettuati e la merce si intenderà accettata a tutti gli effetti. Anteriormente

all'installazione e/o collaudo lo strumento non dovrà essere, per nessun motivo, utilizzato. In caso contrario, il Cliente verrà ritenuto responsabile delle eventuali anomalie di funzionamento che lo strumento dovesse presentare al momento del collaudo.

8. Tutela della Privacy

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. del 30 giugno 2003 n° 196 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, EuroClone S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, informa di possedere dati acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite terzi, relativi alla spettabile Clientela (aziende, istituzioni etc.) unicamente per la promozione, la conclusione e l'esecuzione di contratti; a tali dati avrà accesso esclusivamente il personale dedicato ed espressamente autorizzato. Vigono i diritti di cancellazione, anonimato, blocco, aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati trattati.

9. Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dalla fornitura delle apparecchiature indicate sul preventivo e dall'esecuzione del contratto di compravendita e dai servizi di garanzia è esclusivamente competente il foro di Milano.

SCOPRI TUTTI

I NOSTRI CATALOGHI

Scansiona il QR code qui sotto per scoprire tutti i nostri cataloghi:

- Laparoscopia monouso
- Laparoscopia Microline Surgical
- Suture Panther Healthcare
- Versator Veol Medical



Alcuni dei marchi citati nei cataloghi sono disponibili tramite Euroclone solo in Italia.



EuroClone®
serving science through innovation

Euroclone SpA
Società a Socio Unico

Via Figino, 20/22
20016 Pero (MI) Italy
T +39 02 381951
F +39 02 38101465
M info@euroclone.it

www.euroclone.it

Quality Management System Certified to ISO
9001 and ISO 13485 international standard