

SOLUZIONI PER
LA MORCELLAZIONE
IN SICUREZZA

VERSATOR®



EuroClone®

Morcellazione sicura ora una realtà

Laparoscopia

Sono ben noti e largamente accettati dalla comunità medica i benefici derivanti dall'approccio laparoscopico. Nel caso di una isterectomia o di una miomectomia laparoscopica, evitare una incisione addominale laparotomica porterà ad una guarigione più veloce, con meno dolore post-operatorio, un minor rischio di infezioni, e pertanto un ritorno alle normali attività quotidiane più veloce.

- Nessuna grande incisione addominale
- Minore formazione di adesione
- Meno dolore post-operatorio
- Minor rischio di infezione
- Guarigione e recupero più veloci
- Meno sanguinamento intraoperatorio
- Tasso di riammissione post-operatorio più basso, degenza ospedaliera ridotta

La morcellazione dei tessuti, effettuata in abbinamento con un dispositivo di isolamento e contenimento del tessuto, è uno dei più importanti benefici ottenuti nelle procedure laparoscopiche.


Versator + MorSafe = una soluzione vincente

Il morcellatore di tessuti **New Versator** è un prodotto unico in quanto permette di morcellare utilizzando un manipolo monouso leggero e, al contempo, potente grazie ad un cavo-rotore anch'esso monouso collegato ad un generatore (VDU).

L'isolatore MorSafe è progettato proprio per le procedure di morcellazione ottenendo dei benefici unici e non replicabili da altri prodotti disponibili sul mercato. Utilizzando MorSafe quindi, si potrà prevenire la dispersione di tessuti nella cavità peritoneale durante le procedure di morcellazione laparoscopica.

Il morcellatore di tessuti Versator e l'isolatore MorSafe utilizzati insieme offrono la migliore qualità per la cura della paziente. E finalmente, per la prima volta, sarete sicuri di morcellare grandi quantità di tessuto efficacemente e velocemente a una velocità superiore e, cosa più importante, in totale sicurezza.

Con questa combinazione unica di Versator® e MorSafe® puoi morcellare tessuti di grandi dimensioni in modo rapido, efficiente e, cosa più importante, in sicurezza.

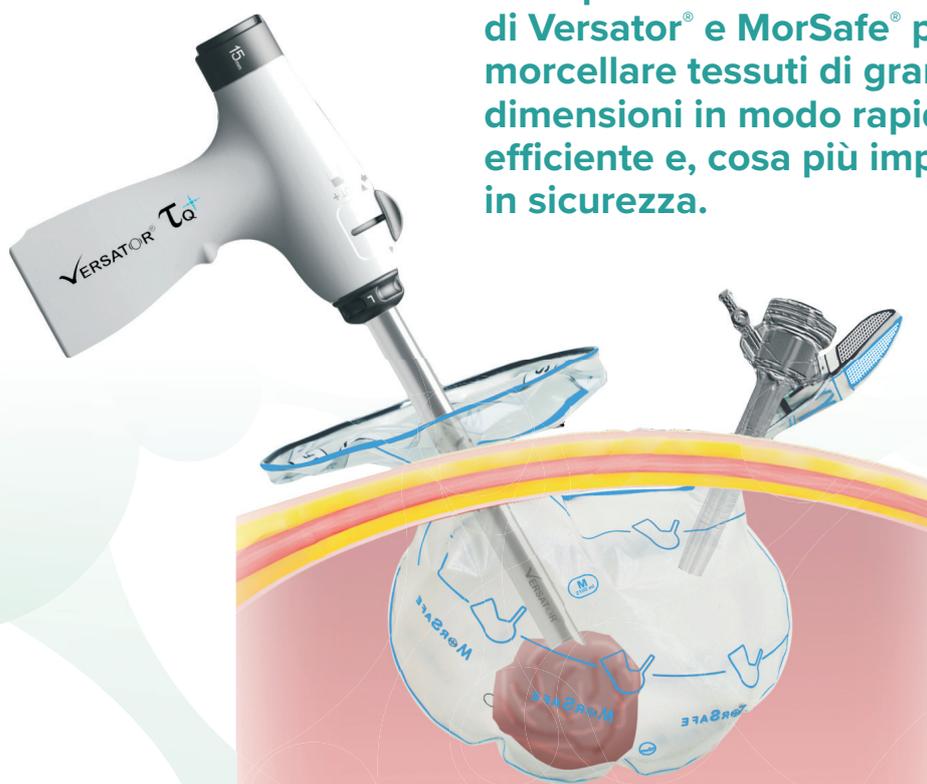

Versator® manipolo

Il morcellatore di tessuto New VERSATOR, è un dispositivo monouso costituito da un manipolo a contatto con i tessuti, completo di riduttori per strumentario da 5 e da 10 mm, otturatore dilatante e cavo-rotore monouso. L'otturatore, dilatandosi, permette di ridurre lo spazio anulare tra la punta dell'otturatore stesso e la camicia del manipolo, mentre il cavo-rotore permette di trasmettere energia al manipolo. Questa versatile combinazione garantisce benefici nel rapporto costo/efficacia dello strumento.

Nuova cannula: diametro interno ed esterno aumentati di 1 mm.

Nuova valvola: tenuta aumentata, migliore estrazione dei tessuti.

Nuovo riduttore: migliore identificazione.



Profilo della lama "Core Guard" per una maggiore sicurezza del paziente

Posizioni sulla ghiera



CUT Mode



CUT PLUS Mode

Manipolo



Sistema di aggancio/sgancio rapido Manipolo/Rotore



Rotore

Monouso

Il cavo-rotore e il manipolo sono monouso

Veloce

Taglio rapido del tessuto con una velocità massima di **1600 rpm**


Leggero

Il manipolo VERSATOR è **ergonomico, leggero** e semplice da utilizzare

Versator® centralina

La centralina VDU consente al manipolo New VERSATOR di approssicare e morcellare in modo efficiente qualsiasi tessuto per via laparoscopica. Le sue caratteristiche salienti sono:

- **Eccellente efficacia nei tessuti calcificati:** l'elevata coppia motrice della centralina e la lama affilata sul manipolo assicurano un taglio facile e regolare anche nei miomi più calcificati.
- **Ergonomico:** l'impugnatura e la disposizione ergonomica dei controlli di taglio, un display intuitivo e l'attivazione a pedale, assicurano una procedura meno faticosa
- **Facile da utilizzare:** una semplice e facile interfaccia (display) abbinata a una veloce e facile connessione con il manipolo aiutano l'utilizzatore a rendere più agevole la procedura.
- **Alta Velocità:** La centralina consente la selezione di ben 8 livelli di velocità favorendo un miglior controllo nella morcellazione ed una maggiore efficacia
- **Alta qualità dei materiali:** l'utilizzo dei migliori materiali assicura una lunga durata e una migliore affidabilità nel corso degli anni di utilizzo.

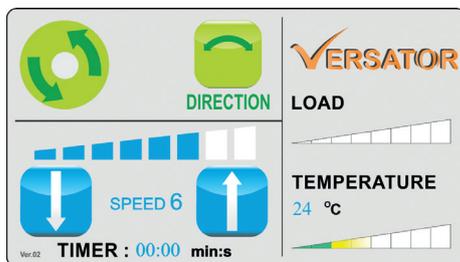

Interfaccia Grafica Utente

Facile

Facile utilizzo tramite un'interfaccia/display touch-screen

Sicuro

Protezione automatica di sicurezza contro i sovraccarichi

Smart

Funzione timer procedurale

Potente

L'elevata coppia motrice garantisce sempre la potenza sufficiente per ogni tipologia di tessuto.




MorSafe™ Tissue Isolator

MorSafe™ è un innovativo dispositivo medico monouso pensato per essere utilizzato come contenitore e isolatore durante le procedure ginecologiche laparoscopiche quali miomectomie o isterectomie.

MorSafe™ può essere abbinato al Sistema VERSATOR per la morcellazione dei tessuti per contenere e rimuovere il tessuto morcellato.

Il dispositivo presenta caratteristiche uniche che gli permettono un facile rilascio in cavità, una facile insufflazione, morcellazione e una tenuta ermetica nella fase di recupero del contenitore-isolatore MorSafe.

Il prodotto numero 1 al mondo specifico per una morcellazione sicura

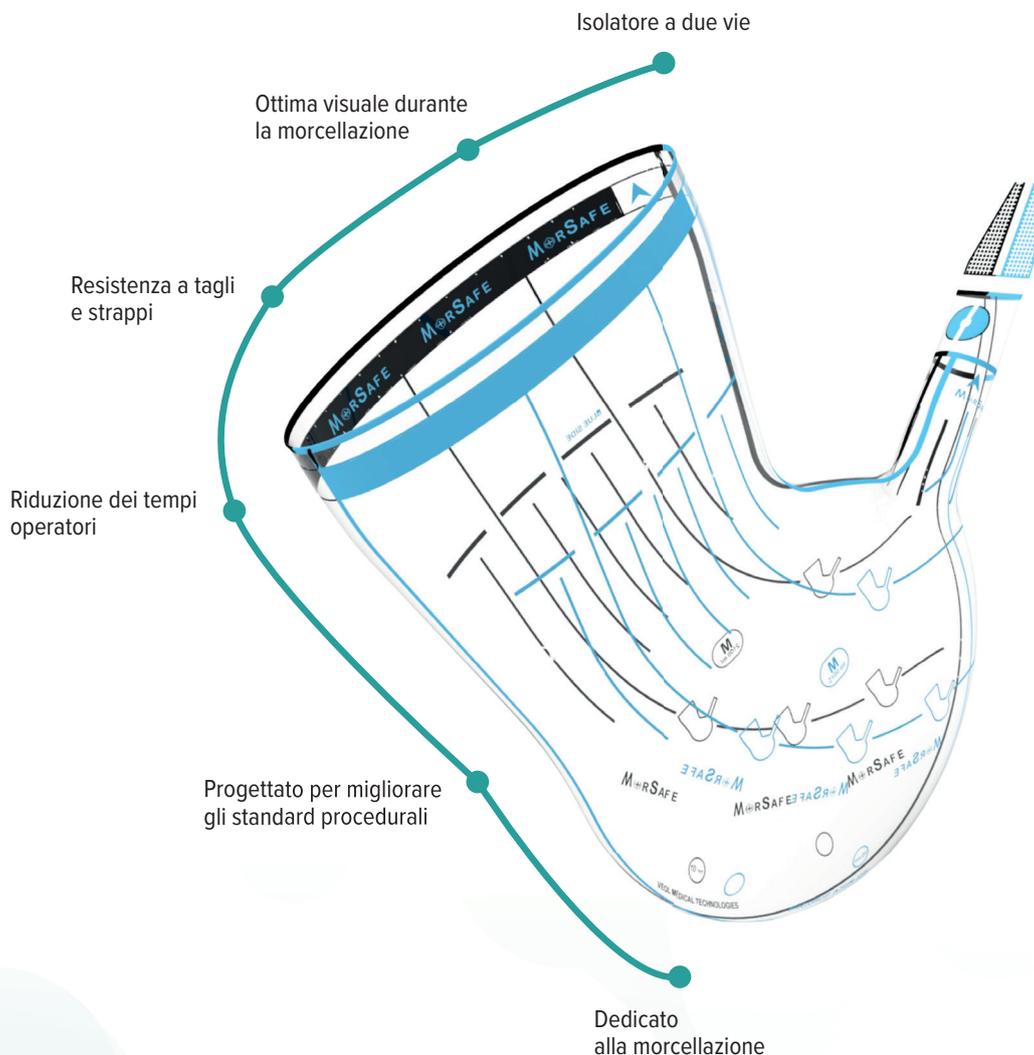

Sistema per una morcellazione sicura

Un kit procedurale perfetto

Il sistema per una morcellazione sicura comprende una centralina (VDU), un manipolo monouso comprensivo di otturatore, riduttore, un cavo-rotore monouso e un contenitore-isolatore monouso con il suo introduttore dedicato.

Manipolo monouso

- **Velocità di taglio** 200 - 1400 RPM
- **Diametro di taglio** 15 mm
- **Modalità di taglio** CUT, CUT PLUS, OFF
- **Peso** 150 g
- **Lunghezza operativa** 160 mm

Contenitore-isolatore monouso

- Accessi 2
- Capacità
- **Small:** 1600 CC
- **Medium:** 2100 CC
- **Large:** 2600 CC

VDU

- **Velocità** 200 - 1400 RPM
- **Dimensioni** 345 x 215 x 110 mm
- **Potenza** 100-240 VAC, 350 Watts
- **Peso** 4,5 Kg

Rotore monouso

- **Camicia Rotore Lunghezza:** 2000 mm
- **Peso** 460 g
- Compatibile con Gynecare Drive Unit

Guida all'acquisto

| Codice | Descrizione prodotto | Conf. |
|--|---|-------|
| Versator - Morcellatore Monouso | | |
| VR3000 | Morcellatore Versator Kit comprendente: n°1 centralina, n°1 pedaliera, n°1 cavo di alimentazione | 1 pz |
| VT-H15-D-1 | Kit Versator con manipolo diam. 15 mm, completo di otturatore e cavo rotore, riduttori per strumentario da 5 e 10 mm, sterile e monouso | 1 pz |
| MorSafe - Isolatore per la morcellazione in ambiente chiuso | | |
| XG500S | Isolatore MorSafe per la morcellazione in ambiente chiuso dei miomi, monouso, sterile - Misura Small - blu & nero - capacità 1.600 cc | 5 pz |
| XG500M | Isolatore MorSafe per la morcellazione in ambiente chiuso dei miomi, monouso, sterile - Misura Medium - blu & nero - capacità 2.100 cc | 5 pz |
| XG500L | Isolatore MorSafe per la morcellazione in ambiente chiuso dei miomi, monouso, sterile - Misura Large - blu & nero - capacità 2.600 cc | 5 pz |

EUROCLONE OFFRE, CON I SUOI
SPECIALISTI DI PRODOTTO, UN **SUPPORTO**
PER SODDISFARE **OGNI ESIGENZA.**

CONSULENZA PRE E POST VENDITA

PRESENZA DURANTE GLI INTERVENTI

TRAINING DEL PERSONALE
IN SALA OPERATORIA

DIMOSTRAZIONI TECNICHE E PRATICHE

ASSISTENZA TECNICA

SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO

LAPAROSCOPI

MICROLIN
SURGICAL



EuroElo

LAPAROSCOPI

MONOUS



EuroElo

SCOPRI TUTTI

I NOSTRI CATALOGHI

Scansiona il QR code qui sotto
per scoprire tutti i nostri cataloghi:

- Laparoscopia monouso
- Laparoscopia Microline Surgical
- Suturetrici Panther Healthcare
- Versator Veol Medical



Alcuni dei marchi citati nei cataloghi sono disponibili
tramite Euroclone solo in Italia.

CATALOGO
SUTURATRICI



SOLUZIONI PER
LA MORCELLAZIONE
IN SICUREZZA



PANTHER HEALTHCARE
VHMED
HANGZHOU VALUED MEDTECH
HANDLIKE
SURGICORE
ALESI SURGICAL
BLUE SURGICAL



Euro[®]loné



Euro[®]loné



LAPAROSCOPIA



CATALOGO
SUTURATRICI



Euro[®]loné



Euro[®]loné



CATALOGO
SUTURATRICI



SOLUZIONI PER
LA MORCELLAZIONE
IN SICUREZZA



PANTHER HEALTHCARE
VHMED
HANGZHOU VALUED MEDTECH
HANDLIKE
SURGICORE
ALESI SURGICAL
BLUE SURGICAL



EuroClone®
serving science through innovation

Euroclone SpA
Società a Socio Unico

Via Figino, 20/22
20016 Pero (MI) Italy
T +39 02 381951
F +39 02 38101465
M info@euroclone.it

www.euroclone.it

Quality Management System Certified to ISO
9001 and ISO 13485 international standard